

タンパク質結晶化用沈殿剤の調製に最適！

1 チャンネル高速ピペッター Scorpion

- ▼ マルチリンク式1chシリンジで、迅速に（最大 2m/秒）、様々な容器からの分注が可能
- ▼ 使いやすいソフトウェアで、濃度勾配、pH勾配、試薬の添加などを簡単セットアップ
- ▼ 容量に合わせて、50 μ L、200 μ L、1000 μ L のディスポチップを使用
- ▼ 15mL/50mL 遠沈管、ディープ/シャローウェルプレート、スクリーニングプレート、チップラックなどを6つまで設置




● こんな悩みはございませんか？

- | | |
|------------------|------------------------------|
| ・ 作成するプレートの枚数が多い | ✓ 迅速に自動でプレート作成 |
| ・ 使用する試薬の種類が多い | ✓ 充実した試薬リストから選ぶだけ |
| ・ 試薬添加量の計算が大変 | ✓ pH、%、勾配を入力するだけでソフトウェアが自動計算 |
| ・ ヒューマンエラーをなくしたい | ✓ プロトコル選択で複雑な操作もミスなく作成 |
| ・ 大型ロボットは大きすぎる | ✓ 実験台の上に置ける省スペース設計 |

● 直感的で使いやすいソフトウェア

濃度 (%) や pH の勾配を設定するだけで、各ウェルに入れる試薬量を自動的に計算します。

あとは、デッキレイアウトの通りに試薬をセットすれば、最短のルート进行計算して分注操作を行います。

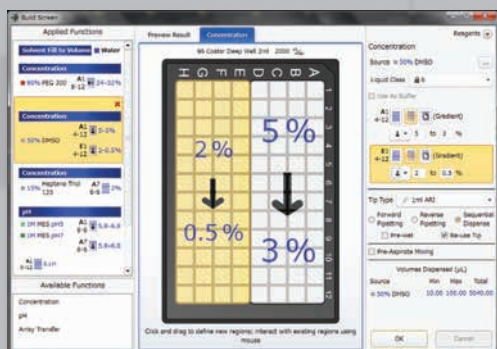


例：濃度勾配設定画面



例：pH 勾配設定画面



例：デッキレイアウト

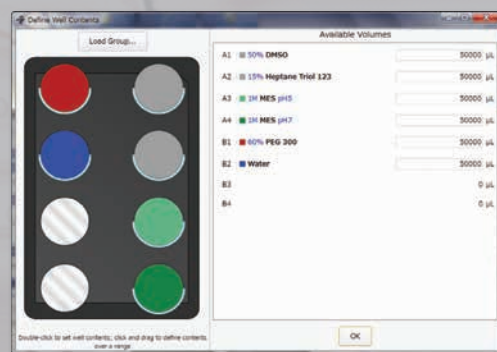

例：サンプル / 試薬レイアウト

● 仕様

マルチリンク式シングルチャンネル分注ロボット Scorpion

サイズ (WDH)

幅483 x 奥行483 x 高さ698 mm

重量

約 41 kg

電源

100 V、3 A、50/60 Hz

※別途、制御用 PC が必要です。

仕様チップサイズ

50uL、200uL、1000uL (専用チップ)

デッキポジション

6 ポジション

使用可能フォーマット

ディープ / シャローウェルプレート、結晶化スクリーニングプレート、マイクロチューブ、15mL/50mL 遠心チューブ、チップラックなど



www.artrobbins.com/

※ 本製品は試験研究用です。医療や診断目的にはご使用いただけません。

※ 価格、外観、仕様などは、予告なしに変更することがあります。

※それぞれの商標や登録商標、製品名は各社の所有する名称です。

代理店

輸入元



株式会社 スクラム

本社

〒135-0014 東京都江東区石島 2-14
Imas Riverside 4F

Tel. (03)6458-6696 Fax. (03)-6458-6697

西日本営業所

〒532-0003

大阪市淀川区宮原5-1-3 NLC新大阪アースビル403

Tel. (06)6394-1300 Fax. (06)6394-8851

Web Site : www.scrum-net.co.jp

SC20220126A